

INTEGO. VÝKON, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.



SIRONA.COM

The Dental Company

sirona.

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER

INTEGO je nejlepší zubní souprava svého druhu. Je založeno na síle inovací a oceňovaném designu našich stávajících zubních souprav. Jako spolehlivý partner pro efektivní praxi, INTEGO má všechny vlastnosti, které poskytují optimální podporu: ergonomický design pro lepší pracovní postupy, vysokou úroveň kvality zpracování a designu, a vysokou hodnotu – proto je INTEGO naší reprezentativní třídou.

Enjoy every day. With Sirona.

ERGONOMICKÝ DESIGN

Navrženo pro intuitivní ovládání a optimalizované, integrované pracovní postupy.

Více na stranách 06 | 09

KVALITA MADE IN GERMANY

Definované procesy pro zajištění kvality, odolné materiály a robustní design budoucnosti.

Více na stranách 18 | 19.

VYSOKÁ HODNOTA

Vynikající výkon a inovativní funkce za skvělou cenu, přizpůsobené možnosti pro vysokou hodnotu.

Více na stranách 04 | 05



OBSAH

- 04 Verze a provozní koncepty
- 06 Ergonomický design
- 10 Snadná obsluha
- 12 Flexibilní design pro budoucnost
- 14 Komfort pro pacienty
- 16 Hygienické funkce
- 18 Kvalita značky Sirona
- 20 Individuální konfigurace

VYSOKÁ HODNOTA, NA SPOLEHNOUT.

Váš pracovní den je složitý a na zubní soupravu, kterou si vyberete, klade mnoho různých nároků. INTEGO vám poskytne perfektní řešení: Vyberte si ze dvou modelů, které můžete flexibilně nakonfigurovat. Ať už si vyberete INTEGO nebo INTEGO pro, horní nebo spodní vedení hadic – každá varianta nabízí optimální výkon za přiměřenou cenu.



INTEGO

- Zubní souprava s kompaktní vodní jednotkou pro optimální využití prostoru.
- Uživatelské rozhraní EasyPad pro snadné a intuitivní ovládání.
- Kompaktní rameno asistentky s širokým rozsahem otáčení.
- Kontrolovaná kvalita vody s manuálně plněnou lahví na vodu.
- K dispozici jako model TS se spodním vedením hadic nebo CS s horním vedením hadic.

KTEROU SE MŮŽETE



INTEGO pro

- Integrovaný, komplexní hygienický koncept pro dosažení optimálních výsledků.
- Dotykový displej EasyTouch a integrovaný nožní ovladač pro snadné a intuitivní ovládání.
- Flexibilní rameno asistentky vhodné pro dvou- nebo čtyřruční ošetření.
- Četné možnosti vybavení s vysokou hodnotou.
- K dispozici jako model TS se spodním vedením hadic nebo CS s horním vedením hadic.

pro

Tato ikona na následujících stránkách brožury označuje vybavení, které je k dispozici pouze s INTEGO pro.


ERGONOMICKÝ DESIGN MŮŽETE SPOLEHNOUT.

Zubní souprava je srdcem vaší praxe. INTEG0 dokonale kombinuje vzhled a funkčnost - takže můžete pohodlně pracovat za optimálních podmínek. Kromě jejich harmonického designu, koordinovaných komponentů a různých barevných kombinací, zubní soupravy INTEG0 splňují přísná kritéria naší ergonomické koncepce. INTEG0 se přizpůsobí stylu vaší praxe – a vaší chuti.



Prémiové polstrování

Bezešvé, vysoce kvalitní polstrování zajišťuje komfort i během dlouhotrvajících zákroků.

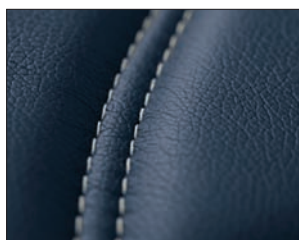

Lounge polstrování

Měkké, příjemné na povrch, pohodlné na sezení pro maximální relaxaci. Tvarovaný povrch pro perfektní polohování.

BAREVNÉ KOMBINACE


ELEGANTNÍ SVĚT

Klasické nadčasové kombinace pro vysoce kvalitní vzhled.



PŘIROZENÝ SVĚT

Měkké teplé odstíny pro uklidňující léčebné prostředí.

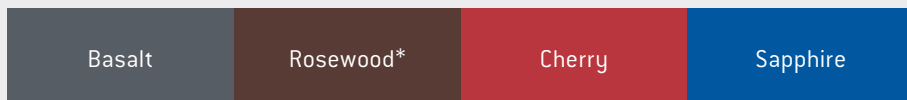

VITÁLNÍ SVĚT

Živé barvy a světlé tóny pro moderní prostředí plné života.



* Dostupné barvy pro Lounge polstrování

IGN, NA KTERÝ SE



CENAMI OVĚNČENÝ DESIGN

Společnost Sirona získala u mnoha svých produktů prestižní ocenění za design, včetně cen ret dot design, iF Product Design Award Gold, iF Communication Design Award a Good Design Award.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY

Každá léčba je složitý proces. Naše ergonomická zařízení umožňují optimální přístup k pacientovi a bezproblémový pracovní postup při ošetřování s vysokou úrovní pohodlí pacienta. INTEGRO kombinuje každý rozměr ergonomie, aby pro vás bylo ošetřování jednodušší. Dosahujte skvělých výsledků i na konci dlouhého pracovního dne – s vašimi odbornými znalostmi a s podporou naší zubní soupravy.



1 INTUITIVNÍ SEZENÍ	2 POHODLNÉ POLOHOVÁNÍ	3 OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST	4 INTEGROVANÝ PRACOVNÍ POSTUP	SKVĚLÉ VÝSLEDKY
Větší svoboda pohybu Tenké opěradlo pro ideální volnost pohybu nohou, flexibilní umístění nožního ovládání. Optimalizované umístění nástroje Dokonalá koordinace ramene lékaře a asistenta, flexibilní umístění přidavného táčku na modelu s horním vedením hadic a se spodním vedením hadic. Pohodlné pracovní stoličky HUGO, CARL, PAUL	Snadné nastavení zubní soupravy Flexibilní nastavení výšky, otočné plivátko. Nejllepší podpora páteře Ergonomické, komfortní polstrování. Synchronizované pohyby opěradla a sedadla pro optimální polohování pacienta. Není potřeba žádné přenastavení opěrky hlavy, když je podpěra zad sklopena. Větší komfort pro pacienta Jemný pohon zdvihu křesla, loketní opěrky, podnožka Vario.	Dokonalé osvětlení ošetřované oblasti Pracovní světlo LEDview nebo LEDlight, LED osvětlení nástroje. Flexibilní opěrky hlavy Plochá opěrka hlavy nebo opěrka se dvěma klouby. Perfektní intraorální snímky SiroCam F nebo SiroCam AF, monitor 22" HD na zubní soupravě.	Intuitivní ovládání Uživatelské rozhraní EasyPad nebo dotyková obrazovka EasyTouch. Integrované funkce stolních zařízení Integrované ovládání kroutícího momentu pro endodoncii, Apexlokátor na obrazovce EasyTouch. Moderní zařízení Inovativní nástroje, moderní systém komunikace s pacientem SIVISION, USB, SD karta a Ethernetové rozhraní.	■ Klinicky perfektní ■ Esteticky dokonalý ■ Ideální pro úspěch vaší praxe



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Obtížná ošetření vyžadují vaši plnou koncentraci. To je důvod, proč je INTEG0 intuitivní - s dvěma novými, snadno pochopitelnými uživatelskými rozhraními a inovativními nástroji pro ošetřování bez stresu. Tyto nástroje Vám umožní soustředit se na to, co je opravdu důležité – pacient a perfektní výsledek ošetření.



EasyPad

Jasně a intuitivní uživatelské rozhraní je standardní výbavou u INTEG0 i INTEG0 pro.



EasyTouch

Toto uživatelské rozhraní může být zabudováno jako volitelná výbava do INTEG0 pro. Větší komfort při ovládání díky technologii intuitivní dotykové obrazovky a další ovládací a zobrazovací možnosti.


Mikromotor BL ISO E

Obzvláště lehký, kompaktní a s rozhraním ISO. Otáčky a kroutící moment jsou ideální pro endodontické ošetření.



Integrované řízení točivého momentu

Motor se automaticky zastaví, když je dosaženo nastaveného maximálního kroutícího momentu. Tím je zajištěna vyšší bezpečnost a perfektní průběh endodontického ošetření.

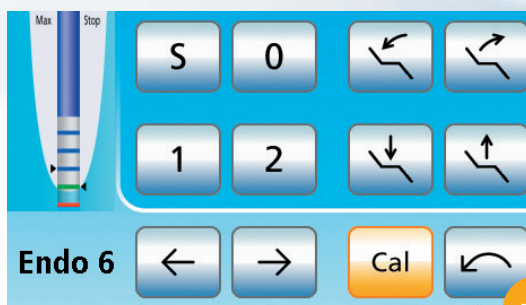

Apexlokátor

Do rozhraní EasyTouch může být integrován také Apexlokátor, který umožňuje stálou kontrolu pracovní hloubky v průběhu endodontického ošetření.



SPRAYVIT E
Optimální viditelnost s LED světlem.

SIROSONIC L SCALER
Násadec a špičky mohou být sterilizovány; kontrované lineární kmitání. S elektronickým ovládáním výkonu a chlazení.

SIROCAM F NEBO AF
Snadno instalovatelné „plug & play“ kamery pro pořizování detailních intraorálních snímků. SIROCAM AF s automatickým ostřením se ovládá zvláště snadno.



FLEXIBILITA PRO BUDOUCNOST

V dobré praxi zvyšují vlastní nastavení vaše pohodlí. To je důvod, proč si můžete nakonfigurovat INTEGO přesně tak, jak potřebujete pro optimální podporu vašeho pracovního postupu. Flexibilita ale pro nás znamená ještě něco více – INTEGO si můžete vybavit dalším technickým příslušenstvím a rozhraními, takže budete připraveni na budoucí aplikace.





MNOHO MODELŮ

VÝBĚR ZE DVOU OPĚREK HLAVY

Přímoú opěrku hlavy lze nastavit rychle a flexibilně. Jako volitelnou výbavu si můžete vybrat opěrku hlavy se dvěma klouby, která se snáze polohuje a umožňuje optimální viditelnost i v obtížně viditelných místech.



Přímá opěrka hlavy



Opěrka hlavy se dvěma klouby

DVĚ RŮZNÁ PRACOVNÍ SVĚTLA – VŽDY OPTIMÁLNÍ OSVĚTLENÍ

Výběr ze dvou LED světel pro optimální osvětlení pracovního prostoru. Je možné je flexibilně polohovat a hygienicky obsluhovat pomocí bezdotykového senzoru.



LEDlight



LEDview

RAMENO ASISTENTKY: COMFORT NEBO COMPACT

Oba asistenční prvky jsou velmi skladné a umožňují maximální volnost pohybu. U modelu Comfort můžete pracovat pohodlně i bez asistenta.



Rameno asistentky Comfort



Rameno asistentky Compact

Ještě více možností.
Na straně 22 naleznete další možnosti konfigurace, jak přizpůsobit INTEGO optimálně vašim potřebám.

DESIGN PRO BUDOUCNOST



Integrované rozhraní USB

ROZHRANÍ: FLEXIBILITA PRO BUDOUCNOST

Síťové rozhraní v křesle pacienta a USB port na rameni lékaře nebo asistentky vám umožní integrovat nové funkce a vaši praxi zasíťovat – řešení potíží s pomocí vašehoservisního technika je tedy mnohem jednodušší.



Monitor SIVISION 22" AC

Monitor SIVISION 22" AC

S tímto monitorem můžete vašemu pacientovi vysvětlovat intraorální a rentgenové snímky, softwarové a plánovací zobrazení, videa a prezentace v PowerPointu přímo v zubní soupravě.

PŮSOBIVÉ POHODLÍ PACIENTA

Vaši pacienti také ocení tento komfort: křeslo pacienta INTEG0 má ergonomický design a společně s opěrkou hlavy zajistí, že se vaši pacienti budou cítit obzvlášť pohodlně. Křeslo je možné snížit natolik, že se do něj snadno dostanou i ti nejmenší pacienti. A není pochyb o tom, že pacienti, kteří mají pocit pohodlí, se cítí bezpečněji a zůstávají svému lékaři věrní.



OPĚRKA HLAVY SE DVĚMA KLOUBY
Rychle nastavitelné podle různých léčebných situací a pacientů různých postav.

VELMI KVALITNÍ POLSTROVÁNÍ
Kvalitní polstrování zajišťuje pohodlí i při dlouhém ošetření.

**SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY OPĚRADLA A SEDÁKU
PRO OPTIMÁLNÍ POLOHOVÁNÍ PACIENTA**
Sklápění opěradla odpovídá pohybu páteře pacienta, aby se zabránilo natahování a kompresi.

OPĚRKY RUKOU
Vaši pacienti si mohou pohodlně opřít své paže. Levá loketní opěrka se používá jako opora při posazování a vstávání z křesla; pravá se sklopí z cesty.



POLOHOVACÍ SYSTÉM
Unikátní pohon zdvihání křesla opatrně přesouvá pacienty do správné polohy.

OPĚRKA NOHOU VARIO
Opěrku nohou Vario, která je dodávána s čalouněním Premium, lze snadno prodloužit, aby bylo zajištěno ergonomické polohování i pro velmi vysoké pacienty.

BEZPEČNÁ HYGIENA

Zubní lékaři na celém světě mají nejvyšší nároky na bezpečnost svých pacientů a svého pracovního týmu. Hygienická koncepce INTEG0 je navržena tak, abyste mohli rychle a snadno dodržovat všechny hygienické předpisy. Konstrukce ramene asistentky a vodní jednotky zajišťuje, že hygienické procedury jsou mnohem jednodušší a méně časově náročné. To vše zaručuje dokonalou likvidaci infekcí, což je skvělé pro vás, vaše pacienty, i váš tým.

INTEGO

Kompaktní vodní jednotku i rameno asistentky je možné přizpůsobit podle mnoha různých potřeb a požadavků pomocí volně volitelných odsávacích systémů a hygienických zařízení.

PLIVÁTKO
Odnímatelné a otočné, snadno se čistí a je snadno přístupné.

FUNKCE PROPLACHOVÁNÍ
Automaticky pročistí všechny vodní cesty nástrojů na straně lékaře i asistentky.

ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Je kompatibilní se všemi běžnými mokkými a suchými odsávacími systémy, včetně odlučovače amalgámu.



Láhev s destilovanou vodou

Pro kontrolovanou kvalitu vody. Může být také naplněna roztokem DENTOSEPT pro permanentní dezinfekci a manuální sanitaci.



Automatické čištění sací hadice

Čistící adaptér pro automatické proplachování odsliňovače a HVE.



Hladké povrchy

Design povrchu, který je převážně bez spár, zajišťuje maximální kontrolu infekce v nejkratší možné době.



INTEGO pro

Komfortní vodní jednotka i rameno asistentky jsou založeny na komplexním pojetí hygieny. Rychle a snadno dosáhnete nejvyšších hygienických standardů.

PLIVÁTKO
Odnímatelné a otočné,
vyrobené z vysoce
kvalitního skla.

**FUNKCE PROPLACHOVÁNÍ A
AUTOMATICKÉHO PROPLACHOVÁNÍ**
Hadice nástrojů je možné rychle
propláchnout nebo intenzivně čistit
pomocí čistících adaptérů.

ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
Je kompatibilní se všemi běžnými
centrálními mokkými a suchými odsávacími
systémy, včetně odlučovače amalgámu.

pro



Integrovaný systém dezinfekce

Trvalá dezinfekce všech vodních cest pomocí DENTOSEPTu. Funkce automatické sanitace pro pravidelnou intenzivní dezinfekci. Lze použít i jako manuální dodávku vody.



Integrované čistící adaptéry

Pro automatické proplachování hadic nástrojů (AutoPurge) a sanitaci vodních cest.



Chemické čištění sací hadice

Nádoba na čistící prostředek pro chemické proplachování odsávacích hadic. Koncentrace čistících prostředků může být individuálně upravována.

KVALITA, NA KTEROU SE SPOLEHNOUT.

Nechceme naše zákazníky jen uspokojovat, chceme na ně zapůsobit. Proto jsou pro nás kvalita, výkon a servis klíčové. Zubní spravy Sirona v sobě spojují vysokou kvalitu s reálnými inovacemi, které citelně zvyšují komfort léčby a práce.

INTEGO NABÍZÍ VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTU A NEJVYŠŠÍ KVALITU – V KAŽDÉM OHLEDU


Spolehlivost a odolnost

Precizní a náročné testy kvality a robustní materiály zajišťují, že zubní souprava INTEGO je velmi spolehlivá s nadprůměrně dlouhou životností.



Vysoká kvalita

INTEGO okamžitě ukazuje naši pozornost k detailnosti zpracování. Použité materiály – robustní, tvárné plasty, uvnitř díly z pevné oceli a hliníku, vysoce kvalitní sklo a čalounění – splňují vysoké nároky na kvalitu prvotřídního produktu.

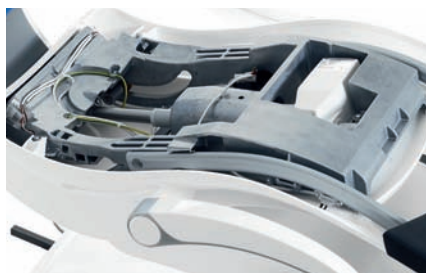

Vysoké standardy

Společnost Sirona je technologickým lídrem s více než 130letou historií inovací, která nastavuje vysoké standardy kvality. Zhruba 290 inženýrů a vědců ve výzkumu a vývoji nejenže věnují velkou pozornost kvalitě – oni také řídí proces inovací.



Design budoucnosti

Ve vývojovém centru společnosti Sirona jsou vytvářeny budoucí trendy a připravovány produkty, které budou vybaveny pro technologické požadavky budoucnosti.



SE MŮŽETE

MADE IN
GERMANY



Navrženo a vyrobeno v Německu. S použitím přesně definovaných postupů, které zajišťují největší spolehlivost



INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE

Vaši zubní soupravu INTEGO si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a splňovalo vaši vlastní požadovanou vysokou hodnotu.

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA	VERZE
INTEGO Křeslo pacienta ■ Prémiové polstrování ■ Přímá opěrka hlavy ■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů Rameno lékaře ■ 5 pozic instrumentů ■ Uživatelské rozhraní EasyPad ■ Podpora dvou rotačních instrumentů Rameno asistentky ■ Kompaktní provedení na otočném rameni namontovaném přímo na vodní jednotku ■ 4 pozice instrumentů ■ Odslíňovač a HVE Vodní blok ■ Kompaktní design ■ Standardní mokré odsávání ■ Příprava pro integraci systému láhve s čerstvou vodou ■ Plivátko s manuální otočnou funkcí	INTEGO TS Se spodním vedením hadic  ■ Výšku ramene lékaře lze upravit a upevnit v pozici pomocí pneumatické brzdy ■ Ergonomický design s flexibilně polohovatelným ramenem lékaře a pohyblivým držákem tácku ■ Dostatečná plocha pro nástroje na rameni lékaře a tácku INTEGO CS S horním vedením hadic  ■ Ideální pro nejširší škálu situací při ošetření, ať už pracujete samostatně nebo v týmu ■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm ■ Výšku ramene lékaře lze upravit a upevnit v pozici pomocí pneumatické brzdy

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA	VERZE
INTEGO pro Křeslo pacienta ■ Prémiové polstrování ■ Pneumatické nožní ovládání nástrojů ■ Přímá opěrka hlavy ■ 4směrový nožní joystick Rameno lékaře ■ 5 pozic instrumentů ■ Uživatelské rozhraní EasyPad ■ Podpora dvou rotačních instrumentů ■ Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře ■ Elektronika napájení pro motory a OZK Rameno asistentky ■ Komfortní provedení, na nosném rameni s širokým rozsahem otáčení ■ 4 pozice instrumentů ■ Odslíňovač a HVE ■ Světelný zdroj pro SPRAYVITE Vodní blok ■ Komfortní design ■ Příprava pro integraci automatického desinfekčního přístroje ■ Integrované čistící adaptéry ■ Plivátko s manuální otočnou funkcí ■ Mokré odsávání s ventilem volby místa ■ Integrované čištění sací hadice proplachováním vodou ■ Ohříváč vody	INTEGO pro TS Se spodním vedením hadic  ■ Výšku ramene lékaře lze upravit a upevnit v pozici pomocí pneumatické brzdy ■ Ergonomický design s flexibilně polohovatelným ramenem lékaře a držákem tácku ■ Dostatečná plocha pro nástroje na rameni lékaře a tácku INTEGO pro CS S horním vedením hadic  ■ Ideální pro nejširší škálu situací při ošetření, ať už pracujete samostatně nebo v týmu ■ Optimální dosah nástrojů: až 90 cm ■ Výšku ramene lékaře lze upravit a upevnit v pozici pomocí pneumatické brzdy

UŽIVATELSKÉ BALÍČKY

**START**

- Standardní třicestná stříkačka
- Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře
- 2 turbínkové hadice
- Pracovní světlo LEDlight

**ADVANCE**

- Elektronické nožní ovládání C+
- SPRAYVIT E na rameni lékaře
- Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře
- 1 turbínková hadice
- 1 mikromotor BL ISO E s napájecí elektronikou
- Pracovní světlo LEDlight

**INNOVATION**

- Elektronické nožní ovládání C+
- SPRAYVIT E na rameni lékaře
- Zdroj světla pro instrumenty na straně lékaře
- 1 turbínková hadice
- 1 mikromotor BL ISO E s napájecí elektronikou
- OZK SIROSONIC L
- Pracovní světlo LEDview

BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

**SIVISION ready**

- Rozhraní USB
- Síťové rozhraní

**SIVISION Start**

Bez monitoru

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Držák monitoru na nosném sloupku světla



S monitorem

SIVISION Start

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Držák monitoru na nosném sloupku světla
- Monitor 22" AC

**SIVISION Advance**

S monitorem

- SIVISION ready
- SIROCAM AF
- Držák monitoru na nosném sloupku světla
- Monitor 22" AC

UŽIVATELSKÉ BALÍČKY

**START pro**

- Elektronické nožní ovládání C+
- SPRAYVIT E na rameni lékaře
- 1 turbínková hadice
- 1 mikromotor BL ISO E
- Pracovní světlo LEDlight

**ADVANCE pro**

- Elektronické nožní ovládání C+
- SPRAYVIT E na rameni lékaře
- 1 turbínková hadice
- 1 mikromotor BL ISO E
- OZK SIROSONIC L
- Uživatelské rozhraní EasyTouch
- Pracovní světlo LEDview

**INNOVATION pro**

- Elektronické nožní ovládání C+
- SPRAYVIT E na rameni lékaře
- Třetí rotační pozice
- 1 turbínková hadice
- 2 mikromotory BL ISO E
- OZK SIROSONIC L
- SPRAYVIT E na rameni asistentky
- Uživatelské rozhraní EasyTouch
- Pracovní světlo LEDview

**ENDO pro**

- Integrované ovládání kroutícího momentu
- Apexlokátor včetně držáku
- ENDO 6: 1 kolénkový násadec
- eControl

* Pouze s uživatelským rozhraním EasyTouch.

BALÍČEK VOLITELNÉ VÝBAVY PRO RAMENO LÉKAŘE NEBO RAMENO ASISTENTKY

**SIVISION ready**

- Rozhraní USB
- Síťové rozhraní

**SIVISION Start**

Bez monitoru

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Držák monitoru na nosném sloupku světla



S monitorem

SIVISION Start

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Držák monitoru na nosném sloupku světla
- Monitor 22" AC

**SIVISION Advance**

S monitorem

- SIVISION ready
- SIROCAM AF
- Držák monitoru na nosném sloupku světla
- Monitor 22" AC

VAŠE INDIVIDUÁLNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA

Zde si můžete prohlédnout kompletní seznam všech jednotlivých prvků volitelné výbavy, a kontrolní seznam toho, co je zahrnuto v základní konfiguraci.

Možnosti	INTEGO	INTEGO pro
Křeslo pacienta		
2 pozice křesla, polohy S a O	●	●
Centrální rozvodná skříňka	●	●
Systém zdvihání křesla 140 kg	■	–
Systém zdvihání křesla 185 kg	□	●
Rovná opěrka hlavy	■	■
Opěrka hlavy se dvěma klouby	□	□
Polstrování Premium	■	■
Lounge polstrování	□	□
4směrový nožní joystick	○	●
Podsedač pro malé pacienty	○	○
Loketní opěrka, pravá, sklopná	○	○
Loketní opěrka, levá	○	○
Sada ventilů pro externí zařízení	○	○
Souprava pro redukci tlaku	○	○
Souprava pro instalaci krytu	○	○
Samostatná rozvodná skříňka	○	○
Základní deska pro nerovné podlahy, úprava pro instalaci řady C, která má být nahrazena	○	○
Rameno lékaře		
Výškově nastavitelné opěrné rameno s pneumatickou brzdou	●	●
5 pozic instrumentů	●	●
Podpora pro 2 rotační instrumenty včetně napájení bez osvětlení	●	●
Pneumatické nožní ovládání nástrojů	■	■
Elektronické nožní ovládání C*	□ A, I	□ S, A, I
Uživatelské rozhraní EasyPad s podporou 2 uživatelů	●	■
Uživatelské rozhraní EasyTouch s podporou 4 uživatelů	–	□ A, I
SPRAYVIT E se světlem	□ A, I	□ S, A, I
SPRAYVIT E se světlem (voda na levé straně)	□ A, I	□ S, A, I
Standardní třicestná stříkačka	□ S	–
Turbínková hadice se světlem	○ 2 x S, A, I	○ S, A, I
Turbínková hadice Borden	○	–
Mikromotor BL ISO E s hadicí	○ A, I	–
Mikromotor BL ISO E s hadicí (příprava pro Apexlokátor)	–	○ S, A, 2 x I
Druhý mikromotor BL ISO E (příprava pro Apexlokátor)	–	○ I
OZK SIROSONIC L	○ I	○ A, I
Třetí rotační pozice	○	○ I
Polymerizační lampa Satelec Mini LED	–	○
Zdroj světla pro turbínku a SPRAYVIT E	○ S, A, I	●
Souprava ovládání kroutícího momentu	○	○ E
eControl, zvýšení rozsahu otáček motoru od 100 do 40.000 ot/min.	○	○ E
Apexlokátor	–	○ E
ENDO 6:1 kolénkový násadec	○	○ E
Prohlížeč intraorálních rentgenových snímků	○	○
Funkce propláchnutí a ruční dezinfekce	○	–
Funkce propláchnutí	–	●
Přídavný držák tácků pro 2 tácky standardní velikosti	○	○
Silikonová podložka pro rameno lékaře TS	○	○
Přídavný držák tácků CS pro 1 tácek standardní velikosti	○	○

Možnosti	INTEGO	INTEGO pro
Přídavný držák tácků CS pro 2 tácky standardní velikosti	○	○
Silikonová podložka pro rameno lékaře CS	○	○
Náhradní silikonové návleky na rukojeti	○	○
Přídavný držák kamery pro rameno lékaře TS	○	○
Rameno asistentky		
Verze Compact, otočný, namontovaný přímo na vodním bloku	■	–
Verze Comfort, na nosném rameni s širokým rozsahem otáčení	□	●
4 pozice instrumentů	●	●
Odsliňovač a HVE	●	●
SPRAYVIT E se světlem	□	□ I
SPRAYVIT E se světlem (voda vlevo)	□	□ I
Standardní třicestná stříkačka	□	–
2. pozice HVE	○	○
Polymerizační lampa Satelec Mini LED	○	○
Ovládací klávesnice	○	○
Světelný zdroj pro SPRAYVIT E	○	●
Silikonová podložka pro rameno asistentky Comfort	○	○
Vodní blok		
Design Compact, příprava pro láhev s čerstvou vodou	●	–
Design Comfort, příprava pro integrované desinfekční zařízení	–	●
Plivátko s manuální otočnou funkcí	●	●
Snížená cena bez plivátka	□	–
Příprava pro standardní mokré odsávání	■	–
Příprava pro mokré odsávání s automatickou kontrolou odsávání	□	–
Ventil volby soupravy	□	■
Ventil plivátka Dürr	□	□
Automatický separátor	□	□
Odlučovač amalgámu	□	□
Vzduchový venturi systém (Air Venturi)	□	–
Láhev s čerstvou vodou bez přepnutí na přívod z řádu	□	–
Láhev s čerstvou vodou s přepnutím na přívod z řádu	□	–
Integrovaný desinfekční systém s permanentní desinfekcí vodních cest a funkcí automatické sanitace	–	○
Ohřívač vody	○	●
Čistící systém sací hadice vodním proplachováním	○	■
Chemický čistící systém sací hadice	–	□
Pracovní světla		
LEDlight	□ S, A	□ S
LEDview	□ I	□ A, I
Rameno pro intraorální RTG HELIODENT ^{PLUS}	○	○
Komunikace s pacientem		
Rozhraní USB v rameni lékaře nebo asistenta	○ SiR, SiS, SiA	○ SiR, SiS, SiA
SIROCAM F	○ SiS	○ SiS
SIROCAM AF	○ SiA	○ SiA
Držák monitoru na nosném sloupku světla	○ SiS, SiA	○ SiS, SiA
Monitor 22" AC (s integrovanou napájecí jednotkou)*	○ SiS, SiA	○ SiS, SiA
Síťové rozhraní	○ SiR, SiS, SiA	○ SiR, SiS, SiA

- Součástí základní konfigurace
- Volitelná výbava
- Variace, součást standardní jednotky
- Volitelná varianta
- Není možné / použitelné
- * Balíček SIVISION Start s monitorem

- SiR Balíček SIVISION ready
- SiS Balíček SIVISION Start s/bez monitoru
- SiA Balíček SIVISION Advance
- S Balíček START / START pro
- A Balíček ADVANCE / ADVANCE pro
- I Balíček INNOVATION / INNOVATION pro
- E Balíček ENDO pro



Pracovní stolička HUGO



Pracovní stolička CARL



Pracovní stolička PAUL (na obrázku s přídatnou obručí pro nohy)



Přídavný otočný tácek pro rameno lékaře CS



Přídavný otočný tácek pro rameno lékaře TS



Standardní třicestná stříkačka



Polymerizační lampa Satelec Mini LED



Prohlížeč rentgenových snímků



Přídavný držák pro kameru (pro rameno lékaře TS)



Rameno asistentky Comfort s užívatelským rozhraním



Elektronické nožní ovládání C+



4směrový nožní joystick



Sada ventilů pro externí zařízení



Rameno pro intraorální RTG HELIODENT PLUS



Monitor 22" AC



INTEGO bez plivátka



LEDlight



LEDview



SIROCAM F



SIROCAM AF

VŽDY V ČELE INOVACÍ!

Jako globální lídr inovací pro dentální zařízení neustále investujeme do výzkumu a tím do budoucnosti moderní stomatology. Pomocí síťových digitálních technologií s integrovanými řešeními a optimalizací pracovních postupů vytváříme lepší výsledky léčby, větší komfort a bezpečnost pro pacienta, jakož i úsporu času a nákladů v každodenní práci. Kombinace neustálé inovační síly a globálně rostoucí prodejní a servisní struktury dělá ze společnosti Sirona jedničku celosvětového trhu, které důvěřují tisíce lékařů a laboratoří po celém světě. **Enjoy every day. With Sirona.**



CAD/CAM systems Systémy CAD / CAM

Od průkopníka nové normy. Již 30 let se zabýváme vývojem digitální stomatology a vytváření nových možností pro budoucí praxi a laboratoře.



Zobrazovací systémy

Nejlepší kvalita obrazu s nejnižší dávkou záření. Více než 100 let vývoje rentgenových paprsků pro zubní praxi z nás dělá partner pro inovace číslo 1.



Zubní soupravy

Vizitka moderních ordinací. Snažíme se vytvořit ideální ergonomickou a inovační zubní soupravu. Individuálně ušité na míru pro pohodu pacienta a podle požadavků lékaře.



Přístroje

Výhody, které mluví samy za sebe. Dbáme na to, abychom poskytovali správnou rovnováhu mezi osvědčenou kvalitou, individuální ergonomií a inovativními technologiemi pro uživatelsky přívětivou práci.



Hygienické systémy

Schopnost, která vám dává bezpečí. Pokud jde o hygienu v praxi, nic neošidíme.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Německo, www.sirona.com

The Dental Company

sirona.