

KaVo Primus® 1058

Spolehlivost, která nadchne.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Primus® 1058

Bestseller KaVo Primus® 1058. Spolehlivost po generace.

Letitou praxí s úspěchem otestovaná spolehlivost.

Model KaVo Primus 1058 je jeden z mnoha úspěšných modelů německého výrobce kvalitních výrobků KaVo. Proč je tato zubní souprava tak oblíbená? Její enormní spolehlivost a pevnost. Všechny součásti a funkce jsou ideálně navzájem vyladěné, se záměrným vynecháním zbytečností. Tím je váš model Kavov Primus 1058 zvláště hospodárný – nyní, ale i dlouhodobě. To už dokáží ocenit tisíce zubních lékařů po celém světě.



*Stolní verze KaVo Primus 1058 TM.
Výškově nastavitelné křeslo pro pacienta od
395 mm do 780 mm.*

Víte, co chcete. Správný koncept léčby.

Pro každého to správné – naše tři osvědčené varianty.

Kdo se rozhodne pro přístroj KaVo Primus 1058, má jasné priority. Stomatologická souprava musí fungovat plynule, s jistotou používání a dbát o přesvědčivé výsledky léčby. Promyšlený lékařský prvek, prvek pro pomocný personál se snadným ovládním, automatické hygienické funkce, ergonomie pro lékaře, pomocný personál i pacienty a množství dalších vlastností přístroje KaVo Primus 1058 toto zabezpečují. Přitom se díky třem variantám optimálně hodí do vaší systematiky léčby a vašich prostor praxe.

- **Verze stůl.**

Kompaktní lékařský prvek Vám daruje ještě více svobody pohybu pro perfektní, ergonomické činnosti v každé ošetřující pozici.

- **Verze lavice.**

Vyvážené nástroje leží ihned perfektně v ruce a hygienické hadicové vedení, stejně jako uzavřený kryt usnadňují hygienu.

- **Verze vozík.**

Užijte si i ve verzi vozík intuitivní vedení ovládním, využijte doplňkovou mobilitu vašeho lékařského prvku a, pokud budete potřebovat, postavte jej stranou.



Lavicová verze KaVo Primus 1058 S.

Vozíková verze KaVo Primus 1058 C.



KaVo. Dental Excellence.

Přáním každého lékaře by mělo být: pracovat uvolněně, každý den.

Optimalizované trasy uchopení a efektivní průběhy.

Zcela stejné, ať ošetřujete v sedě nebo ve stoje: Prvek pro lékaře vašeho modelu KaVo Primus 1058 vás podporuje, abyste pracovali ergonomicky. Natahovat se a otáčet – to už nemusíte. Můžete trvale zaujmout přirozené držení těla a pohybovat, jak jste zvyklí.

Veškeré nástroje, které potřebujete.

Podle Vaší individuální potřeby léčby sestavujeme váš prvek pro lékaře přesně podle vašich požadavků. Můžete volně konfigurovat pět odkládacích ploch na nástroje*. Díky nastavbovému modulu lze doplňkově připojit např. intraorální kamera. Chtěli byste později provést změny, ty pro vás samozřejmě můžeme provést. Tak zůstanete flexibilní i v budoucnosti.

* Váš prodejce Vám rád poradí.



Dvojitě pohodlí ošetřujícího lékaře s funkcí KaVo Memospeed. Pro ukládání počtu otáček při indikacích na třech úrovních pro dva lékaře.

Už jsou všechna místa obsazena? Díky nastavbovému modulu vytvoříte např. doplňkovou odkládací plochu např. pro svoji intraorální kameru přímo na svém prvku pro lékaře.



Osvědčeno milionem vyšetření. Nejvyšší pohodlí v leže pro všechny pacienty.

Pohodlná poloha, klidní pacienti.

Den co den pacienti zažívají na modelech KaVo Primus 1058, jak může být návštěva zubního lékaře uvolněná. Možná to dělá ergonomický sedák křesla pacienta s integrovanou opěrou páteře. I pro léčbu dětí a pacientů s problémy se zády např. kulatá záda, lze křeslo díky integrovanému zdvihání sedací lavice speciálně nastavit. Díky dobré poloze mají radost i ošetřující lékaři, neboť pacienti, kteří leží pohodlně, se automaticky pohybují méně. Vy jako lékař a také váš pomocný personál se můžete tím pádem lépe soustředit na svoji vlastní práci. Důležité plus pro bezpečnost a efektivitu pro Vás.

COMPACTchair vytváří místo.

Pokud si pro své prostory přejete pohodlné vyšetřovací křeslo s menšími nároky na místo, je vaše první volba COMPACTchair řady KaVo primus 1058. Lze zalomit, aby mohli nasedat i vystupovat zvláště i starší lidé. Lze jej z 80stupňové polovice v sedě plynule nastavit do polovice v leže. Konzultujte se svými pacienty v sedě a ošetřujte je následně v leže.

*Křeslo pro pacienty COMPACTchair.
Výškově nastavitelné od 390 mm do 740 mm.*



Více pohodlí při sezení díky měkkému polstrování s ergonomickým sedákem a integrovanou opěrou páteře.



Ať dítě nebo dospělý – díky zdvihání sedací lavice leží všichni vaši pacienti při každé situaci vyšetřování pohodlně a uvolněně.

Prvek pro lékaře a křeslo pro pacienty – přednosti a výhody pro Vás:

- Vždy ergonomicky uvolněné postavení při práci
- Efektivní práce a vše v přímém dosahu
- Pohodlné měkké polstrování s ergonomickým sedákem a integrovanou opěrou páteře
- Soustředěná léčba díky uvolněným pacientům



KaVo. Dental Excellence.

Kdo ho má, má se dobře. Pohodlný nožní spouštěč KaVo.



Nožní spouštěč umožňuje zdravé a přirozené postavení nohou.

Nechte si své ruce volné pro to důležité.

Čím méně se musíte dotýkat, tím je Vaše práce hygieničtější. Aby se vám to podařilo, použijte funkčně a ergonomicky vypilovaný nožní spouštěč. Nabízí vám při ošetřování opravdovou pomoc, zatímco se se svými rukama můžete soustředit a pracovat v ústní dutině hygienicky. Efektivní prevence proti křížové kontaminaci.

Uvolněné pohyby doprava/doleva.

Místo pohybů nahoru/dolů, jako u pedálu plynu pohybujte svoji nohou u nožního spouštěče Vašeho modelu KaVo Primus 1058 horizontálně. Tím nemusíte své svaly na nohou trvale napínat a můžete pracovat zcela uvolněně. Řiďte tímto způsobem své funkce nástrojů, křesla i multimediální funkce.



Podpořte svůj tým. Přizpůsobitelný prvek pro pomocný personál.



Investice do budoucnosti: Výškové nastavení vašeho prvku pro pomocný personál zajišťuje ergonomicky zdravé postavení a pečuje o plynulý průběh prací vašeho pomocníka.

Příkladné pracovní podmínky pro Váš celý tým.

Váš pomocný personál má ihned vše po ruce. Prvek pro pomocný personál vašeho modelu KaVo Primus 1058 je díky svému optimalizovanému výkynnému prostoru vždy výborně dosažitelný a volitelné výškové nastavení podporuje doplňkově ergonomickou a zdravou práci. Vaši kolegové tak mají vždy optimální přístup k pacientům a mají zajištěný plynulý průběh prací.

Nožní spouštěč a prvek pro pomocný personál – přednosti a výhody pro Vás:

- Volné ruce a uvolněné svaly v nohách díky nožnímu spouštěči KaVo s pravým/levým pohybem.
- Ergonomicky zdravé postavení pro Váš pomocný personál díky výkynnému a výškově nastavitelnému prvku pro pomocný personál.

Pouze smysluplná funkce, nic zbytečného: Prvek pro pomocný personál.



KaVo. Dental Excellence.

Jednoduché, bezpečné a časově úsporné. Společnost KaVo zdokonaluje hygienu.



Hygiena snadno: Trvalá sterilizace redukuje při přidávání prostředku KaVo OXYGENAL tvorbu řas a bakterií. Hladné povrchy a odnímatelné ochranné kryty a odkládací plochy na nástroje ulehčují čištění.

Snadno k čisticím součástem.

Čištění modelu KaVo Primus 1058 půjde vašemu pomocnému personálu snadno od ruky. K desinfikování lze odebrat důležité součásti, jako např. silikonové podložky a odkládací plochy na nástroje. Nádoby na vyplachování úst lze odebrat a desinfikovat teplem také. Všechny povrchy jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné čistit snadno a rychle. Tak ušetříte čas denně.

HYDROclean zabraňuje výpadkům.

Automatický program HYDROcleana vašeho modelu KaVo Primus 1058 zabraňuje ucpání, např. krví a sekretem, a stará se o hydromechanické čištění systémů odvodu amalgamu, sání a odtoků. Ve spojení s gelem KaVo DEKASEPTOL se tak můžete spolehnout na trvalou funkčnost.

Díky DEKASEPTOLu jednoduše šetříte čas.

Gel KaVo DEKASEPTOL je smíchaný pro okamžité použití a přímé nasazení. Tím šetříte cenné minuty. DEKASEPTOL kompletně navlhčí odsávací hadice a systémy a udrží se na kritických místech místo toho, aby je jednoduše pouze propláchl.



Automatizovaná ochrana. Vaše všestranná prevence zdraví.

Předcházení křížové kontaminaci.

Aby při vyšetření nebyla do vašeho modelu KaVo Primus 1058 zpětně nasáta kontaminovaná voda, disponují nástroje a motory KaVo inteligentním blokováním zpětného sání. To chrání spolehlivost celkového zásobování vodou a tím i Vás, Váš tým a Vaše pacienty.

Mycí program podle směrnice RKI.

Institut Roberta Kocho stanovil, které standardy musí vyšetřovací jednotka splňovat, aby se spolehlivě zabránilo infekcím. Automatizovaný mycí program vašeho modelu KaVo Primus 1058 – před začátkem práce a po každém pacientovi – bude plně splňovat tyto požadavky.

Vodní blok splňuje požadavky DVGW.

Volným přívodem vody zabraňuje Váš model KaVo Primus 1058 zpětné kontaminaci vašeho domácího vodovodu. Tím splňuje vaše vyšetřovací jednotka i vysoké požadavky Německého svazu pro plyn a vodní hospodářství, zkr. (DVGW).

Hygiena, která šetří čas – přednosti a výhody pro Vás:

- Nejaktuálnější hygienické standardy (dle RKI)
- Automatizované hygienické funkce pro nižší nároky na čas strávený s hygienou
- Funkce HYDROclean k zabránění koagulace bílkovin do interních sacích vedení
- Trvalé a intenzivní sterilizace pro trvalou redukci řas a bakterií
- Odnímatelné díly pro rychlou a lepší hygienu
- Bezpečnost pro lékaře, pomocný personál i pacienty



Filtrační systém: Jednoduše hygienickou rukojeť otevřít a rychle a bezpečně vyměnit sací filtr



KaVo. Dental Excellence.


25000krát ověřeno. Ochrana investice pro Vaši budoucnost.

100% otestováno – 1000krát potvrzeno.

Aby Váš model KaVo Primus 1058 pracoval dlouho a spolehlivě, stanovujeme při zpracování a u materiálu nejvyšší normy. Veškeré stavební díly a součásti jsou zpracovávány přesně, jsou navzájem perfektně sladěné a navrženy na nejvyšší namáhání a životnost.

Abychom si byli 100% jistí, že každý z našich výrobků skutečně splňuje všechny vaše nároky a požadavky, provádíme komplexní testy. U každé jedné vyšetřovací jednotky. Tak jste si jistí, že nedojde k výpadku nebo jiným drahým nepříjemnostem.

A že se kvalita společnosti KaVo vyrobená v Německu vyplácí také Vám, potvrzuje již přes 25000 instalovaných vyšetřovacích jednotek KaVo Primus 1058 po celém světě.

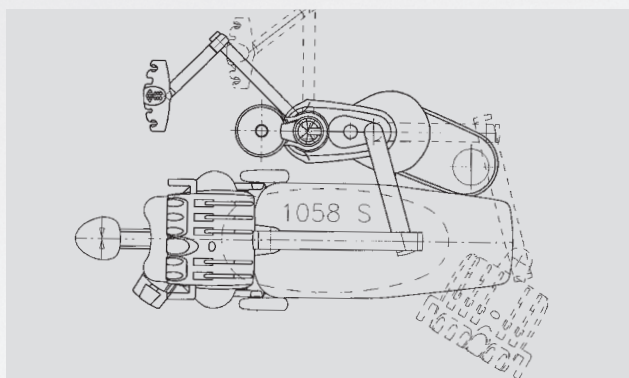

Od začátku perfektně promyšleno – základní rys modelu KaVo Primus S.



reddot design award
winner 2003

Red-dot-Award: Design vaší jednotky KaVo Primus 1058 zohledňuje a podporuje ergonomické efektivní pracovní procesy. „Red dot“ znamená vysoký stupeň inovace, funkčnost a formální kvalita.



Krásné vyhlídky. Nízké náklady ve všech oblastech.

Flexibilní připojovací bod šetří čas i peníze.

Abyste mohli svůj model KaVo Primus 1058 instalovat rychle a výhodně, přijali jsme opatření. Tak můžete omezit stavební opatření a např. použít stávající připojovací bod. Tuto důležitou výhodu Vám nabízí pouze společnost KaVo.

Klasický design pro Vaši budoucnost.

Vsaďte svým modelem KaVo Primus 1058 na nadčasový design. Tím poskytnete svým kolegům a pacientům i po mnoha letech spolehlivost a progresivitu. Klasik mezi vyšetřovacími jednotkami.

Mějte radost z barvy a volitelného doplňkového vybavení.

Výběrem barvy a množstvím doplňkového vybavení se Vás model KaVo Primus 1058 ideálně přizpůsobí Vaším potřebám.

Ekonomie a výhody – přednosti a výhody pro Vás:

- Hospodárné pořízení
- Nákladově efektivní nepřetržitý provoz
- Vysoká bezpečnost proti výpadkům a životnost
- Časově šetrné procesy
- Velká integrovatelnost a možnost kombinace
- Široká produktová paleta určená pro Vás koncept léčby

Barvy laků (standard) Barvy laků (volitelně)



základní
šedá



purpurová
metalíza



stříbrná
metalíza



jablkově
zelená



oranžová



dentální
bílá

Barvy polstrů



černá



antracitová



noční modř



královská
modř



purpurová



oranžová



mátová



Prohlížeč malého
rentgenového snímku



Prohlížeč panoramatického
rentgenového snímku



ERGOcom light +
ERGOcam



Vyšetřovací
osvětlení EDI



Vyšetřovací osvětlení
KAVOLUX 1410



Pracovní židle
PHYSIO 5007



Váš kompletní sortiment. Volitelné vybavení pro jednotku KaVo Primus® 1058.

	TM	S	Vozík		TM	S	Vozík
Křeslo pro pacienty	●	●	●	Prvek pomocného personálu	●	●	●
Standardní	x	x	x	s ovládacím prvkem Comfort	●	●	●
COMPACTchair	x	x	x	Odsávání aerosolu	●	●	●
Výškově nastavitelný sedák	●	●	● ¹	Savka na odsávání slin	●	●	●
Měkké polstrování	●	●	●	2. savka na odsávání slin	○	○	○
Opěradlo	●	●	●	Stříkačka se 3 funkcemi	○	○	○
Comfort	x	x	x ²	Multifunkční stříkačka	○	○	○
Progress	x	x	x	Polymerační násadec LED	○	○	○
Opěrka hlavy	●	●	●	Držák tácu pro uchycení podnosu	○	○	○
2-kloubová s otočným knoflíkem	●	●	●	Držák tácu pro DIAGNOdent	○	○	○
2-kloubová s tlačítkem	○	○	○	Výkyvný prvek pomocného personálu	●	●	●
Opěrka rukou	●	●	●	výkyvný prvek pomocného personálu s výškovým nastavením	○	○	○
Vpravo	●	●	● ³	Vedení sacích hadic	○	○	○
Vlevo	●	●	● ³	Selektivní odkladač	○	○	○
Strana lékaře	●	●	●	Těleso přístroje	●	●	●
1. Turbinová hadice	●	●	●	Porcelánové plivátko	●	●	●
1. LUX Motor K 200	x	x	x	VACUstopp	●	●	●
1. LUX Motor KL 701	x	x	x	Trvalá sterilizace	●	●	● ⁶
Stříkačka se 3 funkcemi	●	●	●	Intenzivní dezinfekce	○	○	○
Multifunkční stříkačka	○	○	○	HYDROclean (mycí systém)	●	●	●
2. Turbinová hadice	○	○	○	Boiler na teplou vodu	○	○	○
2. LUX Motor K 200	○	○	○	Systém napájení	●	●	●
2. LUX Motor KL 701	○	○	○	Vodní blok DVGW.	x	x	x
COMFORTdrive	○	○	○	Vodní blok Kompakt	x	x	x
PIEZOlux Scaler	○	○	○	Láhev na vodu DVGW	x	x	x
Ukazatel Memospeed indikativní označení	○	○	○ ⁴	Podtlakový regulátor	○	○	○
Malý prohlížeč rentgenových snímků	○	○	○ ⁴	Doplňkové připojení přístroje	○	○	○
Panoramatický prohlížeč rentgenových snímků (na nastavbové tyči osvětlení)	○	○	○ ⁵	Systém odpadu	●	●	●
Panoramatický prohlížeč rentgenových snímků (na stolním prvku)	–	–	○ ⁴	Externí odsávání	x	x	x
Uchycení podnosu US-Tray	x	x	x	Odlučovač amalgamu DÜRR	x	x	x
Uchycení podnosu 1 Norm-Tray	x	–	x	Separovací automatika DÜRR	x	x	x
Uchycení podnosu 2 Norm-Trays	○	○	–	Lapač pevných částic	x	x	x
Ohřev spreje pro nástroje	○	○	○	Ostatní			
Fyziologický roztok kuchyňské soli ERGOcam	○	–	–	Vyšetřovací osvětlení KAVOLUX 1410	○	○	○
	○	○	○	Světlo pro ošetření EDI	○	○	○
				Zvětšovací zrcadlo pro osvětlení	○	○	○
				Nastavbová tyč pro osvětlení	○	○	○
				Servisní box pro pacienty	○	○	○
				Servisní stůl 1568	–	–	○
				ERGOcom light	○	○	○
				DEKASEPTOL základní sada	●	●	●
				Hygienický balíček	○	○	○



● Sériové provedení ○ Volitelné provedení x Je nutno zvolit – Nelze dodat

- 1 Ne u křesla pro pacienty COMPACTchair.
- 2 Pouze u křesla pro pacienty COMPACTchair
- 3 Volitelně u křesla pro pacienty COMPACTchair
- 4 Není vhodné při umístění pod deskou stolu
- 5 Ne ve spojení s multimédií
- 6 Pouze s vodním blokem DVGW a lahví na vodu DVGW



KaVo. Dental Excellence.

KaVo CZ s.r.o., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha
tel.: +420 272 654 566, fax: +420 272 654 732, www.kavo.cz